

Armilla® Patientenarmbänder



Armilla® Patientenarmbänder



- Thermodirekt- oder Thermotransfer-Drucktechnik
- Höchster Tragekomfort
- Sicherheits-Klebeverschluss
- Maximale Sicherheit
- Einfache Handhabung
- Testierte Qualität nach DIN EN ISO 10993-5:2009-10
- CE-Kennzeichnung gemäss Medizinproduktegesetz

Grösstmögliche Sicherheit bei der Patientenidentifikation

Während Hightech und Fortschritt den Krankenhausaufenthalt immer sicherer gestalten, bleibt das Risiko Mensch bestehen.


Komplexere Arbeitsabläufe und die zunehmende Arbeitsbelastung des Klinikpersonals können zu Fehlern mit gravierenden Folgen führen. Aus diesem Grund fordern Fachgesellschaften und Politik seit Langem die Etablierung weitergehender methodischer Prüfverfahren und Kontrollen in Kliniken und Ambulanzen. Derartige Lösungen können nicht nur die Sicherheit der Patienten erhöhen, sondern gleichzeitig Ärzte und Pflegepersonal vor Fehlern schützen.

Die Lösung: Armilla® Patientenarmbänder

Das Armilla® Patientenarmband ist eine einfache und zugleich sichere Verbindung zwischen Patient und Versorgungsprozess. Bei Aufnahme in der Klinik erhält jeder Patient ein komfortables und ergonomisches Kunststoffarmband mit seinem gedruckten Namen und seiner eindeutigen Patientennummer als Text und Barcodeinformation. Durch die Verbindung des Armbanddruckers mit dem Krankenhaus-Informationssystem können sich beim Bedrucken keine Übertragungsfehler einschleichen.

Für grosse wie für kleine Patienten

Die Armilla® Armbänder gibt es in verschiedenen Grössen. Sie eignen sich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Babys. Dank zertifizierter Materialien sind sie angenehm zu tragen. Da sie wasserfest und unempfindlich gegenüber Alkohol, Lösungsmitteln und Seifen sind, müssen sie während des gesamten Krankenhausaufenthaltes nicht ausgetauscht werden.

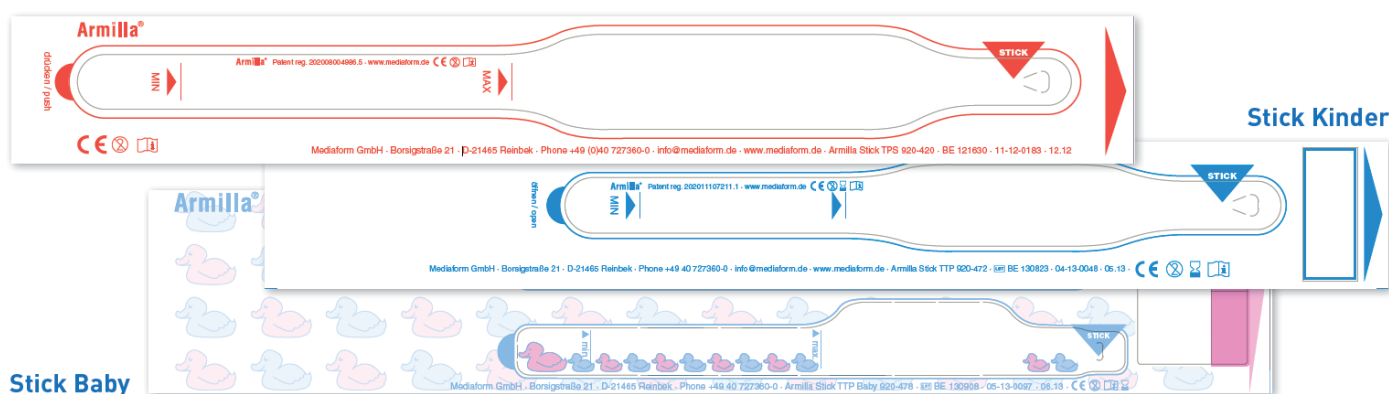

Name	Armilla® Stick Erwachsene		Armilla® Stick Kinder		Armilla® Stick Baby	
Träger in mm	40 x 304,8	24 x 276,0	40 x 304,8	24 x 200,0	56 x 304,8	52 x 304,8
Band in mm	26 x 270,0	24 x 276,0	21 x 192,0	24 x 200,0	20 x 165,0	20 x 165,0
Druckverfahren	Transfer	Direkt	Transfer	Direkt	Transfer	Direkt
Anzahl/Rolle	250	250	250	250	2 x 250	2 x 250
Artikelnummer	7252101.250	7252101.425	7252102.25 0	7252102.425	7252103.250	7252103.400

Zertifizierung „Biologische Sicherheit“

Alle Armilla® Stick Patientenarmbänder auf Rolle sind laut „In vitro Screening / Prüfung auf biologische Aktivität“ (Prüfgrundlage: AWQM-11.08.03.051 Sensibilisierungssay: 2009-04) frei von Sensibilisierungspotentialen und führen zu keinen Hautirritationen, was der „HET-CAM-Test / Prüfung auf allergisierende Wirkung“ (Prüfgrundlage: INVITTOX-Protokoll Nr. 96: Juni 2007: Hühnerei-Test an der Chorionallantoismembran HET-CAM) bestätigt.



Alle Gutachten wurden durch das Institut Hohenstein durchgeführt und sind unter www.sicherheitsarmband.de einsehbar. Armilla® Patientenarmbänder erfüllen die CE-Kennzeichnung (Klasse 1), entsprechend der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte vom 14. Juli 1993 sowie der Richtlinie 2007/47/EG.



Armilla® Laser Stick Erwachsene

- Über einen Laserdrucker zu bedrucken
- Variable Grösseneinstellung
- Sicherheits-Klebeverschluss
- Desinfektionsmittelresistent
- Reissfest

Das Patientenarmband Armilla® Laser Stick für Erwachsene überzeugt durch seinen stabilen Sicherheits-Klebeverschluss und bietet dem Verwender maximalen Tragekomfort, speziell bei längeren Krankenhausaufenthalten. Durch das neue Mono-Soft-Material ist das Patientenarmband besonders hautfreundlich und angenehm zu tragen. Das Armband verbindet so Langlebigkeit mit hohem Tragekomfort und kann zudem als Träger von RFID-Tags dienen. Das Armband kann beispielsweise direkt in der Patientenaufnahme über einen Laserdrucker bedruckt werden.

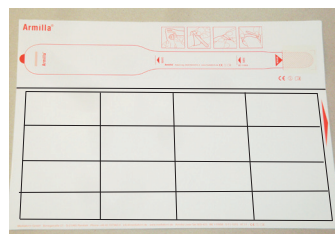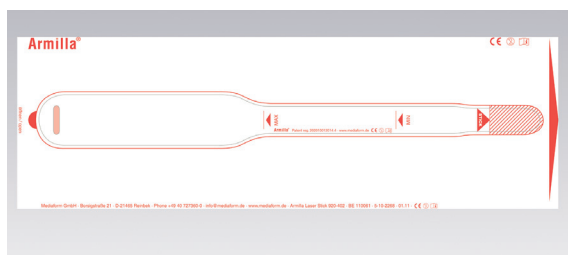

Name	Armilla® Laser Stick Erwachsene	Armilla® Laser Set Erwachsene
Format Träger	105 x 305 mm	210 mm x 297 mm inkl. Etiketten
Band	28 x 277 mm	28 mm x 277 mm
Anzahl/Schachtel	300	300
Artikelnummer	7252004.001	7252007.001

Armilla® Armbanddrucker

- Wartungsarme Armbanddrucker
- Rollenkapazität: 250/400 Armbänder
- Geringe Stellfläche
- Einfacher Rollenwechsel
- Robustes Kunststoff-Klappdesign
- USB und LAN Anschlussverbindung
- 2 Jahre Garantie inkl. Druckkopf



Beständige Druckqualität und einfache Bedienbarkeit

Die Armilla® Armbanddrucker wurden speziell zum Bedrucken von Armilla® Patientenarmbändern konstruiert. Diese Kombination garantiert höchste Materialqualität und einen beständigen Aufdruck, der den gesamten Krankenhausaufenthalt über hält.

Kompakt und bedienerfreundlich

Mit ihren kompakten Massen benötigen die Armilla® Desktop-Armbanddrucker nur wenig Raum. So kommen sie auch bei beengten Platzverhältnissen gut unter und stehen beispielsweise auf der Aufnahmestation eines Krankenhauses nicht im Weg. Ihre Bedienung im laufenden Betrieb und beim Wechseln der Armbandrollen ist denkbar einfach. Über das integrierte LC-Display ist der Anwender immer über den aktuellen Druckerstatus informiert.

Einfache Netzwerk-Installation dank vorkonfigurierter EasyNet SD-Card

Die Armilla® Armbanddrucker lassen sich dank ihrer Anschlussmöglichkeiten unkompliziert in bestehende Krankenhausinformationssysteme einbinden. Ihre vorkonfigurierte EasyNet SD-Card speichert die Netzwerkeinstellungen des Druckers und macht das Drucken zum Kinderspiel. Selbst ein Druckerdefekt stellt kein Problem dar, da durch Umstecken der SD-Card in einen anderen Mediaform Armilla® Armbanddrucker dieser sofort verwendet werden kann. Eine weitere Netzwerkkonfiguration ist nicht nötig, da dank der SD-Card die gleichen Netzwerkparameter (DHCP- oder IP-Adresse, Subnet Maske, Gateway oder Druckername) verwendet werden.



Einfacher Medienwechsel



Intuitive Bedienung




Perfektes Druckbild

Art. Nr.	7103110.003	7103110.001
Druckverfahren	Thermotransfer (TTP)	Thermodirekt (TD)
Auflösung	300 dpi	203 dpi
Max. Druckbreite	54 mm	52 mm
Gehäuse	Doppelwandiges Klappdesign	Doppelwandiges Klappdesign; vorbereitet für Wandmontate
Masse LxBxH	241.3 x 139.9 x 177x4 mm	260 x 109 x 210 mm
Armbandrollen	zu 250 Bänder	zu 400 Bänder
Farbband	max. 90 m Länge	ohne
Schnittstellen	USB / LAN	USB / LAN
Garantie	2 Jahre	2 Jahre



Aus unserem Lieferprogramm

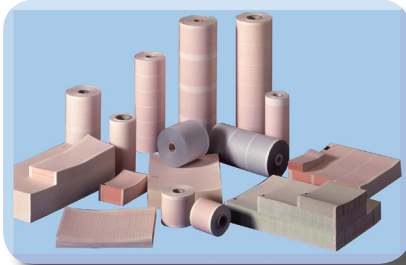


EKG Papier

- aus eigener Produktion
- Faltbücher oder Rollen
- Standard oder Archivqualität

CTG Papier

- aus eigener Produktion
- Faltbücher oder Rollen
- Blattnummerierung

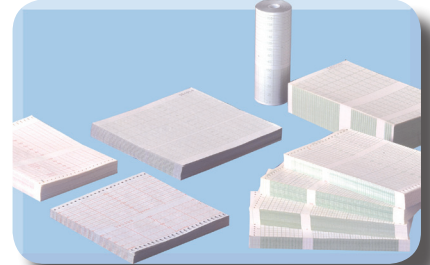


EKG Elektroden SKINTACT

- für sämtliche EKG Anwendungen
- für alle Anschlussmöglichkeiten
- Low-Cost Version mit 6er-Karte

EKG Zubehör

- Gel & Spray
- Adapter
- Pasten

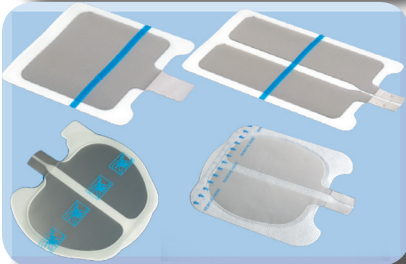

SKINTACT Neutralelektroden

für Hochfrequenzchirurgie (ESU)

- bipolar und monopolar
- universal oder Körperspezifisch

Aktivelektroden

- diverse Aufsätze (Nadeln, Kugeln etc.)
- Handgriffe und Halterungen
- Reinigungsschwämme



Videoprinterpapier

- Farbe oder Monochrom
- SONY und Mitsubishi
- Diverse andere Papiere

Ultraschallgel & Zubehör

- Produktreihe von PARKER
- Skintact Ultraschallgel
- Diverses Zubehör




Medikationsetiketten

- Spritzenetiketten
- Perfusoretiketten
- Praxikett Designer®

Einweg Kopfhörer

- Kunstlederbeschichtet
- 2 m Kabel rechts abgehend
- schwenkbare Hörer

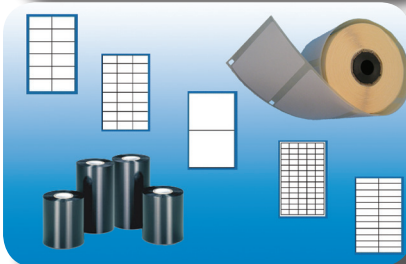

Etiketten und Zubehör

- Thermotransfer / -Direkt
- Thermotransferfolien
- Format-Etiketten

Printerrollen

- Normal- / Thermopapier
- Rollen oder Faltbücher

