

**SKINTACT Easibeat**  
**Multifunktionelle Pädiatrische Defibrillations-Elektroden**

# SKINTACT Easibeat Multifunktionelle Defibrillations-Elektroden

wurden für Defibrillation, nicht-invasive Stimulation/ synchronisierte Kardioversion und Überwachung für pädiatrischen Patienten mit einem Gewicht bis zu 25 kg und mit einer maximalen Energie von 100 Joules einsetzbar.

Leonhard Lang's einzigartiges Herstellungsverfahren "C-Line" garantiert die perfekte Verarbeitung aller Materialien gemäss ISO 13482 und reduziert gleichzeitig auch Kosten. Die perfekte Klebkraft stellt genau das erforderliche Höchstmass an Hautkontakt bei gleichzeitig minimalen Impedanzwerten sicher. Das schont auch die Haut der Patienten.

## Optimale Hautanpassung


Die exzellente Haftung zwischen Elektroden und Haut garantiert festen Sitz auf allen Hauttypen :

- ausgezeichnete Wasseraufnahme des Gels ; die Elektroden funktionieren daher auch auf schweissnasser Haut
- minimale Schichtstärken der einzelnen Materialien erhöhen die Flexibilität der Elektroden
- maximale Kontaktfläche bedeutet minimale Impedanzwerte; dies reduziert auch die hermische und mechanische Belastung der Haut.

## Überlappendes Gel

Diese einzigartige Technologie minimiert das Risiko von Verbrennungen weil:

- der Überschlag („flashover“) minimiert wird
- der Strom besser verteilt wird
- kein Zinn freiliegt
- der Kanteneffekt („edge effect“) minimiert wird

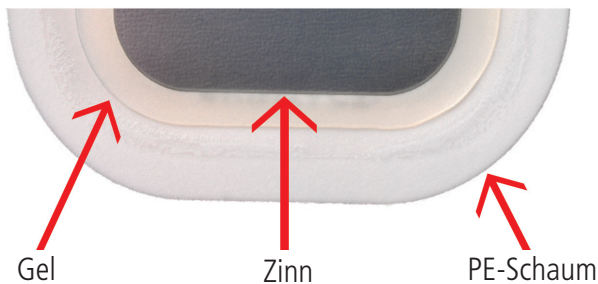

## Haltbarkeit

36 Monate

## Multifunkiton

Die Elektroden brauchen für einen länger andauernden Einsatz nicht abgenommen zu werden. Dies erhöht den Komfort für Anwender und Patienten.

## Qualitätssicherung

Jedes Set wird zu 100 % inspiziert und getestet, bevor es verpackt wird

## Schnell und einfach


Die komfortable Abziehilfe erleichtert das schnelle und einfache Aufkleben und Abziehen der Elektroden

## Klare Gebrauchsanweisung

Die Anweisung zum richtigen Gebrauch sind übersichtlich in zwei Farben (grün und schwarz) aufgedruckt

## Pre Connect

Sämtliche Skintact Easi-beat Elektroden werden mit externem Anschluss angeboten

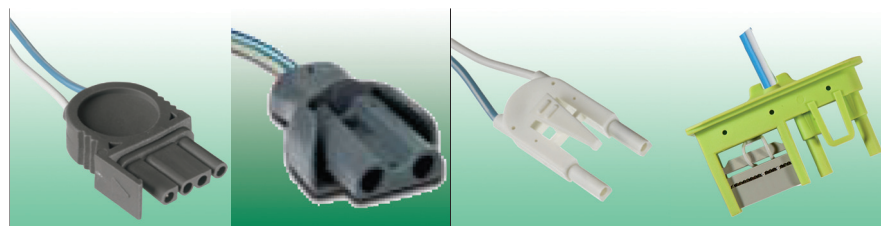

Code	DF31G	DF32G	DF30G	DF72G
Artikelnummer	<b>0411316.003</b>	<b>0411319.003</b>	<b>0411320.003</b>	<b>0411329.002</b>
Kompatibilität zu	Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20,	Heartstart MRx, Heartstart XL,	Zoll E Series Zoll M Series, Zoll PD 1200, Zoll PD 1400, Zoll PD 1600, Zoll PD 1700, Zoll PD 2000	Zoll M Serie Zoll E Serie Zoll R Series Zoll AED PLUS Zoll AED PRO
Verpackung	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton

Alle Skintact Easibeat Multifunktionelle Defibrillations-Elektroden entsprechen dem ANSI/AAMI Standard DF80:2003 für Defibrillation. Weitere Kompatibilitäten (Stecker) auf Anfrage